


Спецификация:

Адаптер.....	AC 240 В, 50/60 Гц
Выходная мощность.....	0.6 Вт/см ²
Напряжение зарядки аккумулятора.....	5.5 В/500 мА
Батарея.....	3.7 /1000мА
Максимальная мощность.....	1.2 В +/- 10%
Время зарядки.....	3 часа
Материал.....	Акрилонитрил-бутадиен-стирол
Размеры упаковки.....	230 X 180 X 70 (мм)
Размеры изделия.....	170 X 52 X 20 (мм)
Вес.....	105 г.



Ультразвуковой прибор
для чистки лица
WELSS WS 7050

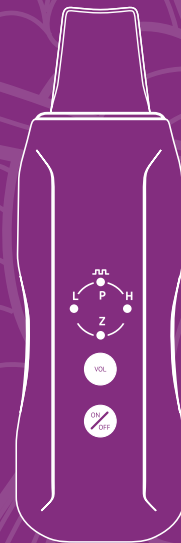

WS 7050



Продукция компании
WELSS – это ваш собственный
косметологический салон!


Руководство по эксплуатации ультразвуковым прибором для чистки лица WELSS WS 7050

Оглавление:

Инструкция по применению.....	4
Принцип действия.....	6
Эффект.....	6
Функции аппарата.....	7
Процедуры.....	8
Ультразвуковой пилинг.....	8
Ультрафонофорез.....	8
Ультразвуковая чистка кожи.....	9
Меры предосторожности.....	10
Противопоказания.....	10
Спецификация.....	11

Благодарим Вас за выбор продукта нашей марки.

Инструкция по применению

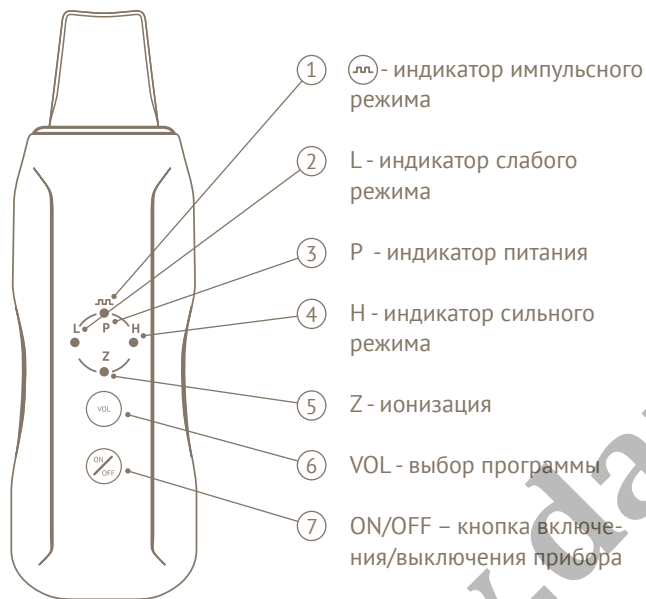

Снимите с лопатки защитную пленку.

Нажмите кнопку ON.

При включении аппарата светятся индикаторы P и L.

Кнопка VOL используется для выбора программы:

- «L» ультразвуковая чистка (слабый режим)
- «H» ультразвуковая чистка (сильный режим)
- Индикатор ультразвуковая пульсация
- «Z» ультразвуковая чистка и ионизация

Если устройство разряжено, раздается звуковой сигнал. Это означает, что устройство вскоре выключится.

Индикаторы P, L, H загораются, когда прибор зарядился.

Индикаторы L, , H, Z поочередно загораются, когда прибор заряжается.

Принцип действия

Ультразвуковой прибор для чистки лица WELSS WS 7050 с частотой колебаний ультразвука 28000 оборотов в секунду удаляет черные точки, комедоны и угревую сыпь. С помощью лопатки особой формы можно очистить кожу и простимулировать нормальную работу всех клеток. Действие аппарата основано на ультразвуковых волнах различной длины, которые глубоко массируют кожу, создавая тем самым согревающий эффект, обновляя и омолаживая подкожные клетки.

Эффект

С возрастом замедление процессов метаболизма и разрушительное влияние ультрафиолетового излучения становятся причиной возникновения черных точек, комедонов, пигментных пятен.

Ультразвуковые волны глубоко проникают в поры, разрушая загрязнения, застарелые и ороговевшие клетки, эффективно удаляя угри, черные точки, комедоны, отбеливая кожу, стимулируя циркуляцию крови и улучшая лимфодренаж.

Функции аппарата:

- Глубокое проникновение ультразвуковых волн в поры и очищение кожи.
- Удаление загрязнений и ороговевших клеток.
- Фонофорез.
- Увеличение эффективности применения обычных косметических средств в несколько раз.
- Разрушение меланина и удаление пигментных пятен на коже.
- Борьба с глубокими и мимическими морщинами.
- Лимфодренажный массаж, улучшающий циркуляцию крови и лимфы.
- Подготовка кожи к проведению терапии с использованием мезороллера WELSS.
- Устранение отеков.

Процедуры

Ультразвуковой пилинг

Ультразвуковой пилинг - аппаратная чистка лица, отшелушивание, а также обновление поверхностных слоев кожного покрова под влиянием высокочастотных вибраций.

Ультразвук обеспечивает глубокое проникновение активных ингредиентов и питание эпидермиса. При помощи звуковых колебаний выполняется своеобразный массаж кожи, стимулируется выработка коллагена.

Ультразвуковой пилинг - одна из самых мягких разновидностей чистки, позволяющая удалять исключительно поверхностные слои эпидермиса, ликвидировать угревую сыпь и загрязненные комедоны, разглаживать морщины, улучшать гемодинамику, обеспечивать естественное увлажнение и лифтинг.

Ультразвуковую чистку лица выполняют до 2-х раз в месяц. При сухой коже процедуру выполняют 1 раз в квартал.

Ультразвуковой пилинг эффективно совмещается с проведением процедуры ультрафонофореза, предусматривающей введение в эпидермис питательных, а также лечебных препаратов.

Ультрафонофорез

Ультразвук повышает активность воздействия препаратов, способствует их глубокому проникновению, увеличивает глубину их действия. Поэтому наиболее эффективно использовать ультразвуковой прибор для чистки лица WELSS WS 7050 совместно со специальной косметикой по уходу за лицом.

Применение ультрафонофореза дает ощутимый положительный результат при многих процедурах, в том числе:

- Профилактика и уменьшение морщин.
- Улучшение тонуса и эластичности кожи лица, шеи и декольте.
- Реабилитация после хирургического лечения возрастных изменений лица и шеи.
- Лечение рубцов.

Ультразвуковая чистка кожи

Ультразвуковые волны глубоко проникают в поры, очищая поверхность кожи от омертвевших клеток, а поры - от сальных пробок и угрей. Кроме того, ультразвуковые волны, согревая подкожные слои, усиливают процессы регенерации, повышают функции соединительной ткани и улучшают кровообращение.

В результате воздействия ультразвука на кожу лица усиливаются окислительно-восстановительные процессы, а сам ультразвук способствует выработке эластина и коллагена. Омолаживающий эффект достигается за счёт микропрогрева и микровибрации тканей. Также повышается иммунитет за счёт улучшения состава крови, активизируются обменные процессы, усиливается регенерация тканей.

Эффект заметен после нескольких процедур в виде уменьшения жирности кожи, сужения пор на лице, нормализации работы сальных желёз, выравнивания рельефа кожи. Подобная методика может применяться не только на лице, но и на спине, на плечах и в области декольте. После курса процедур кожа становится ровной, сияющей, гладкой и обновлённой.

Меры предосторожности

- Протирайте рабочую область прибора спиртосодержащей жидкостью до и после каждого применения.
- Храните массажер при комнатной температуре, в сухом, темном и недоступном для детей месте.
- Задерживайте рабочую область прибора не более 3 минут на обрабатываемой области лица.

Противопоказания:

- наличие гнойничковых и вирусных заболеваний кожи;
- паралича лицевого нерва;
- проявления невралгии тройничного нерва;
- инфекционные болезни;
- 3-месячный период после проведения глубоких либо срединных химических пилингов;
- проведенная процедура имплантации «золотых» нитей;
- беременность и лактация;
- наличие сердечнососудистых и онкологических заболеваний;
- наличие установленного электрокардиостимулятора;
- гайморит и синусит в стадии обострения;
- псориаз и хронические дерматозы;
- выраженный купероз;
- внутриматочная спираль;
- камни в почках или желчном пузыре.

Для заметок
